

DESINFECTION FIABLE POUR DE HAUTES EXIGENCES

Incidin™ Active

Désinfection rapide, agissant sur les spores et sans aldéhydes

Large spectre d'action, y compris l'activité virucide, fongicide et sporicide (p. ex. les spores *Clostridium difficile*).

Fiable même si la désinfection des surfaces présente les plus hautes exigences.

- ▲ Bref temps d'action
- ▲ Concentration d'utilisation basse
- ▲ Avec un système de principes actifs unique **PerOxyBalance®**

TESTÉ SELON
EN 16615
ET DE FAÇON PRATIQUE



LISTE DU RKI
(A/B)



Incidin™ Active

Désinfection rapide, agissant sur les spores et sans aldéhydes

Notre prestation	Votre avantage
Bref temps d'action	Assainissement rapide et efficace des chambres puis réoccupation immédiate
Concentration d'utilisation basse	Même en cas d'épizootie
Un système de principes actifs unique PerOxyBalance®	Solution d'utilisation à pH neutre pour une haute compatibilité des matériaux
Utilisable en alternance avec Incidin™ Pro et Incidin™ Rapid pour la désinfection des surfaces	Changement de produit sans nettoyage intermédiaire, simple intégration dans des processus existants

EFFICACITÉ	CONCENTRATION %	ml/L	TEMPS D'ACTION Min.
Liste VAH (bactéricide, levuricide, mycobactéricide y compris la TB**)			
Désinfection des surfaces selon la norme DGHM 2001, avec mécanique et charge infime et élevée	1/2**	15/30	5/5
Contrôle selon la directive DVV / RKI			
Virucide*	2	30	30
Norovirus (MNV)*	2	30	15
Adénovirus*	2	30	5
Papovavirus / polyomavirus / SV40*	2	30	5
Normes EURO (charge infime et élevée)			
EN 13727 (bactéricide)	0,25	3,75	5
EN 13624 (levuricide)	0,25	3,75	5
EN 13624 (fongicide) ¹	0,5	7,5	60
EN 14348 (mycobactéricide)	1/2	15/30	15/5
EN 14476 (virucide)	1/2	15/30	60/10
EN 13704 (sporicide) ¹	2	30	15
EURO-Normen 4-Felder-Test (hohe Belastung)			
EN 16615 (bactéricide)	1	15	1
EN 16615 (levuricide)	1	15	1
EN 16615 (fongicide) ¹	2	30	60
C. difficile Ribotyp 027 (méthode EN 16615)	1/2	15/30	30/10
Désinfection des surfaces selon la norme DGHM 2001 (charge infime et élevée)			
Mycobactéricide avec mécanique	1/2	15/30	30/5
Liste RKI désinfection des surfaces			
Selon § 18 IfSG (désinfection en cas d'épizootie)			
Domaine d'action A/B	3	45	60
Domaine d'action B	2	30	60
Efficacités supplémentaires			
Spores de C. diff. (Ribotyp 027) dans le test de suspension selon DGHM 2001, charge élevée	2	30	5

* DVV 2015 (Test de susp.) ¹ testé avec charge infime

DOSAGE

Litre de solution	Concentration 1%	Concentration 2%	Concentration 3%
2 litres	30 ml = 1x	60 ml = 2x	90 ml = 3x
4 litres	60 ml = 2x	120 ml = 4x	180 ml = 1x 1x
6 litres	90 ml = 3x	180 ml = 1x 1x	270 ml = 1x 1x
8 litres	120 ml = 4x	240 ml = 1x 2x	360 ml = 2x 2x
10 litres	150 ml = 1x	300 ml = 1x 2x	450 ml = 3x
Cuillère-mesure = 30 ml = 20 g Verre doseur = 150 ml = 100 g Dose = 240 ml = 160 g			

Distribué par :

ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH
 Kägenstrasse 10
 4153 Reinach
 +41 (0) 61-466-94-66
 www.ecolabhealthcare.ch



ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
 Ecolab-Allee 1
 40789 Monheim am Rhein
 +49 (0) 2173-599-1900

CE 0297

ACTIF.
SPORICIDE.
COMPATIBLE.



Désinfection des surfaces des dispositifs médicaux



Concentré de désinfectant pour la désinfection des surfaces de tout genre.
 CHZN 2313

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

La préparation de la solution d'utilisation s'effectue comme décrit ci-dessous. Préparer avec au moins de l'eau potable.

Essuyer la surface à nettoyer avec du chiffon humide. En le faisant, veiller à une humectation uniforme. Il convient aussi de songer à une aération suffisante. Selon l'Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA), les gants de protection doivent être portés.

DURÉE DE VIE

En tant que solution prête à l'emploi, Incidin™ Active doit être remplacée chaque jour de travail.

COMPOSITION


1 % de solution d'Incidin™ Active contient :
 > 600 ppm d'acide peracétique. De légères variations de couleur de la poudre ne représentent pas une perte de qualité du produit.

EXPERTISES

Largement testé au niveau microbiologique, virologique, toxicologique et écologique.

Sur demande nous vous mettons nos nouvelles expertises à disposition.

PRÉPARATION DE LA SOLUTION D'UTILISATION

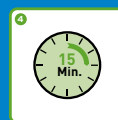

INFORMATIONS DE COMMANDE

Produit	Conditionnement (unité)	Numéro d'article
Incidin™ Active Dose	24 x 160 g	30 518 70

STOCKAGE

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C, dans son emballage d'origine. À stocker en milieu frais, sec et à l'abri des rayons directs du soleil.

LES DISPOSITIFS MÉDICAUX & BIOCIDES SONT À UTILISER AVEC PRÉCAUTION. TOUJOURS LIRE L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS PRODUIT AVANT TOUT EMPLOI. DESTINÉ À UN USAGE UNIQUEMENT PROFESSIONNEL.