Aniosyme Synergy WD Ultra



Le pouvoir ultra detergent pour vos sterilisations centrales

Detergent di-enzymatique pour un pouvoir ultra nettoyant

Aniosyme Synergy WD Ultra est la première formule détergente ultra concentrée pour le traitement automatique de l'instrumentation. Sa formule unique permet l'ajustement du pH, de neutre à alcalin. Sa formule di-enzymatique sans silicate assure une excellente compatibilité avec les matériaux grâce à sa faible concentration.

- Un pH ajustable de neutre à alcalin
- Excellent pouvoir détergent à partir de 0,03 % (0,3 mL/litre)
- Convient au-dessus de pH10 (à 1 %) avec n'importe quelle qualité d'eau
- Produit ultra concentré : stockage et gestion logistique optimisés



ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

Aniosyme Synergy WD Ultra

Détergent di-enzymatique au pouvoir détergent ultra



Aniosyme Synergy WD Ultra
Bidon de 5 L



Aniosyme Synergy WD Ultra
Bidon de 20 L

Une formule unique

- Une formule combinant un pH neutre à alcalin
- Excellent pouvoir détergent
- Utilisable dans toute qualité d'eau

Donnees physico-chimiques

• Densité	20°C	1,158 g/mL
• pH* produit concentré	20°C	9,9
• pH* produit dilué à 0,03 % (solution, 0,3 mL/L en eau déminéralisée)	20°C	10,1
• pH* produit dilué à 1 % (solution, 10 mL/L en eau déminéralisée)	20°C	11,0
• Conductivité du produit dilué à 0,03 % (solution, 0,3 mL/L en eau déminéralisée)	20°C	100,7 µS/cm
• Conductivité à 1 % (solution, 10 mL/L en eau déminéralisée)	20°C	1421 µS/cm
• Viscosité du produit concentré	20°C	< 20 mPa/s

*pH mesurés en condition d'usage à l'aide d'un pH-mètre avec compensation de température.

Informations

Produit	Conditionnement	Référence
Aniosyme Synergy WD Ultra	2 bidons de 5 L	3104720
Aniosyme Synergy WD Ultra	1 bidon de 20 L	3116320

Indications

Détergent di-enzymatique ultra-concentré pour l'instrumentation chirurgicale. Nettoyage du materiel chirurgical et médical, des dispositifs Médicaux dans laveurs-desinfecteurs ainsi que dans les tunnels de lavage. Solution ultra-concentrée réservée à une utilisation professionnelle.

Mode d'emploi

- Utiliser en machine à laver automatique et en tunnel de lavage à la dose d'application de 0,05 %, et avec pour cible la plage de 0,03 à 0,07 %. Si nécessaire, le dosage peut être augmenté jusqu'à 1 %
- Efficace à partir de 5 minutes
- Adapter la concentration, le temps de contact et la température de l'eau de dilution en fonction du degré de souillure, du programme et du niveau de pH attendu pendant la phase de nettoyage
- Température maximum : 60°C

Composition

Surfactants non ioniques, agent séquestrant, complexe enzymatique (protéase, lipase), excipients.

Conditions de stockage


Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Stocker entre +5°C et +25°C.

Certificats

Disponibles sur demande.

Pour une utilisation en toute securite des dispositifs medicaux

Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.

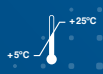

USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.

CH REP

ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Schweiz

ECOLAB EUROPE GmbH
Hofwiesenstrasse 349
CH-8050 Zurich
Schweiz

ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

© 2025 Ecolab USA Inc. All rights reserved. HC-IR-A.SYG.WD.U-5040-2-CH.FR-1125

FS:03/04/2025

10331